

# Microdermabrasionsgerät

---

## Warnung

- Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und die innen liegenden Komponenten oder Zubehör zu untersuchen. Wenn eine Kontrolle notwendig wird, setzen Sie sich dafür mit Ihrem Lieferanten oder einem kompetenten Techniker in Verbindung.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schaden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, Witterungseinflüsse können Schäden verursachen.
- Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.

---

## EC Konformitätserklärung

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

1. Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU
2. Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU

---

## Recycling



Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

---

## Willkommen!

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen.


Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.

**seona**  
Ladenbau & Design

the wellness  
company

---

## SCHALTTAFEL

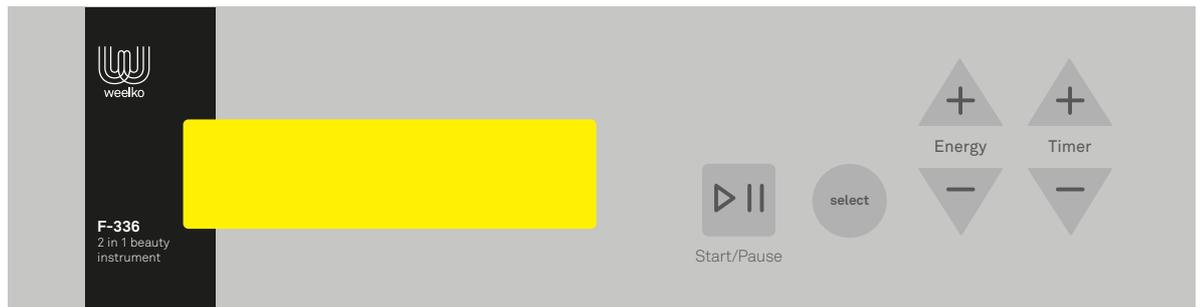


---

## Gebrauchs

1. Stecken Sie das Stromkabel an der Geräterückseite ein.
2. Drücken Sie die Taste "POWER"
3. Drücken Sie die Taste "SELECT" um die gewünschte Funktion zu wählen. Folgende Reihenfolge ist einzuhalten: Mikrodermabrasion mit Mikrokristallen aus Aluminium und Mikrodermabrasion mit Diamant-aufsätzen.

## MIKROKRISTALLEN MICRODERMABRASIONSGERÄT

Behälter für Mikrokristallen:

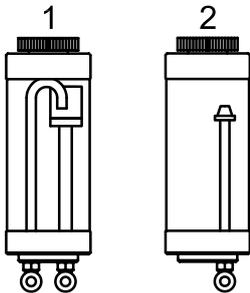


1. Behälter für bereits benutzte Kristallen
2. Behälter für neue Kristallen

### Gebrauchs

1. Montieren Sie die seitlichen Halterungen für die Behandlungsgeräte.


2. Schließen Sie die Luftschläuche an die Behälter an, wie in der Abbildung dargestellt. Die Buchstaben von jedem Schlauch sollen mit denen von den Behältern übereinstimmen. Um diese richtig zu verbinden, sollen die Schläuche nur mit etwas Druck reingesteckt werden. Wenn Sie die Schläuche abmachen möchten, drücken Sie am Plastikteil von der Verbindung und ziehen Sie vorsichtig daran.

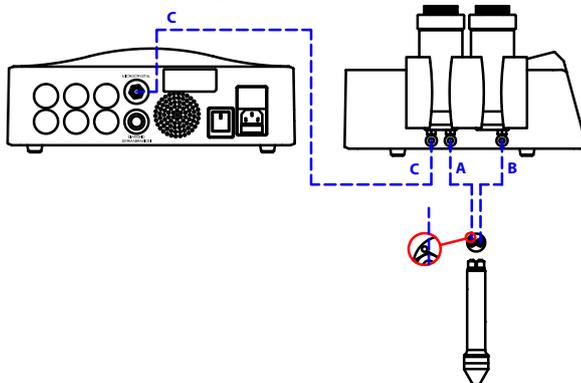

3. Öffnen Sie die "A" Flasche und füllen Sie das Mikrokristall ein, ohne die in der Abbildung dargestellt Obergrenze zu übersteigen. Vergewissern Sie sich, dass keine Kristallen am Gewindebereich bleiben. Es wird empfohlen Kristallen mit Teilchengröße #120 zu benutzen.

#### Wichtiger Hinweis:

- Bitte prüfen, dass das Kopfteil des Handstückes nicht das innere Loch vom Handstück blockiert.
- Manipulieren Sie die Kristallen nicht mit den Händen.

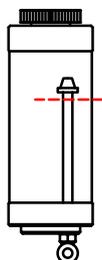

4. Stellen Sie die Ausgangsleistung mit "ENERGY" auf den gewünschten Pegel ein (von 1 bis 10). Wählen Sie die Dauer der Behandlung mit der Taste „TIMER“ (Standard 15 Minuten aber von 0 auf 60 Minuten einstellbar).

5. Drücken Sie "START/PAUSE" um mit der Behandlung anzufangen. Auf dem dynamischen Display wird es abgebildet, wenn das Gerät arbeitet. Sie können auch auf "START/PAUSE" drücken, um die Behandlung anzuhalten und wieder zu starten.

6. Wenn die Zeit der Behandlung um ist, das Gerät wird piepsen und die Funktion wird stoppen. Das Gerät bleibt in Wartemodus.

7. Wenn Sie die Behandlung beendet haben, der Behälter 1 wird voll mit benutzten Mikrokristallen sein und der Behälter 2 wird leer sein. Entleeren Sie den Behälter mit den benutzten Mikrokristallen und füllen Sie Behälter Nummer 2 wieder mit neuen Mikrokristallen auf für die nächste Behandlung. Vergewissern Sie sich, dass der Gewindebereich ohne Kristallen bleibt.

**Wichtiger Hinweis:** Manipulieren Sie die Kristallen nicht mit den Händen.

### Hinweise

- Während der Behandlung, halten Sie immer den Handstück unter das Niveau von dem Gerät. Arbeiten Sie nicht mit dem Handstück über die Höhe des Gerätes.
- Der Griff darf nicht länger als 3-5 Sekunden mit der Haut in Kontakt sein.

### Vorsichtsmaßnahmen


- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Filter des mit dem Gerät angeschlossenen Schlauches nicht angebracht ist.
- Reinigen Sie die Haut, tupfen Sie überschüssiges Wasser vom Gesicht ab und Sie können mit der Behandlung beginnen. Weitere Lotionen oder Emulsionen sind nicht erforderlich.
- Bitte schließen Sie beim Betrieb die Augen damit keine Kristalle in Ihre Augen geraten.
- Stellen Sie für die Behandlung an den Augen den Luftdruck zwischen 1-5 ein. Damit werden zwei sanfte Durchgänge ausreichend sein.
- Vermeiden sie die Sonne 24 Stunden nach der Behandlung.
- Vermeiden Sie Make up die erste 4 Stunden nach der Behandlung.
- Vermeiden Sie Saunagänge die erste 10 Tage nach der Behandlung.
- Reinigen Sie nach den Behandlungen die Haut nochmals mit sauberem Wasser und tragen Sie dann die Pflegeprodukte auf.

## DIAMANT MICRODERMABRASIONSGERÄT

1. Stecken Sie das eine Leitungsende auf der Geräterückseite ein, wie in der Abbildung gezeigt wird.
2. Stecken Sie das entgegengesetzte Leitungsende in den Vakuumhandgriff. Stecken Sie den richtigen Diamantaufsatz in den Handgriff. Es stehen neun Diamantaufsätze zur Auswahl.

Ø 22 MM	
D100	Körper. Geeignet für Akne, Knie, Ellbogen und Gebiete mit Dehnungstreifen
D180	
Ø 19 MM	
D180	Gesicht. Geeignet für große Flecken, Poren, Alterung Sonnenexposition
D220	
Ø 15 MM	
D100	Narben, feinen Linien und verschiedenen Unvollkommenheiten
D200	
D250	
Ø 8 Y 6 MM	
D200	Augen und beide Seiten der Nase.
D250	Falten, Akne, Pickel und Mitesser

3. Überprüfen Sie, dass das Schaumstofffilter im Handgriff richtig angebracht ist.
4. Überprüfen Sie, dass das Metallfilter im Handgriff richtig angebracht ist.

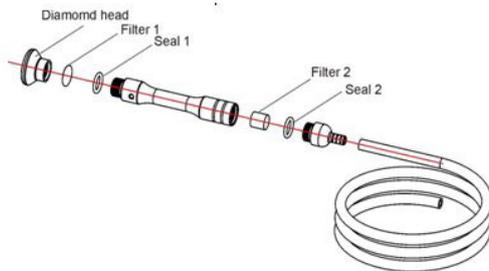

5. Die Saugwirkung kann mit der ENERGY Taste eingestellt werden.
6. Die Saugwirkung kann auch durch Ab- und Aufdecken des Lochs an der Handgriffseite mit dem Finger reguliert werden. .
7. Drücken Sie „START/PAUSE“ um mit der Behandlung anzufangen.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Lassen Sie den Handgriff nicht zu lange an derselben Hautfläche; das könnte zu Verletzungen führen.
- Vermeiden Sie das Gerät auf gereizter Haut zu verwenden.
- Die Hautstellen, auf denen sich Hauttumore, Leberflecken, Muttermale, Blutschwämme, Herpes und Warzen befinden, sowie Lippen und Augen sind für diese Behandlung nicht geeignet.
- Arbeiten Sie mit der Vakuumpumpe nicht über längere Zeiträume, ohne die Abkühlzeit zwischen den Behandlungen einzuhalten, um eine Überhitzung der Pumpe und Schaden am Gerät zu vermeiden. Durch Überhitzung entstandene Schäden an der Pumpe werden von der Herstellergarantie nicht gedeckt.

---

## **FAQ**

### **Diamant microdermabrasionsgerät**

Wenn die Saugkraft nachlässt:

- Ersetzen Sie die Metall- und Schaumstofffilter.

---

## **WARTUNG**

### **Mikrokristallen microdermabrasionsgerät**

- Dieser Filter muss nach jeweils 5 Behandlungen ausgetauscht werden.
- Filterwechsel:
  - Schrauben Sie den oberen Bereich des Tanks auf.
  - Ziehen Sie am Filter um ihn zu entfernen und legen Sie einen neuen ein.
  - Schrauben Sie den oberen Bereich des Tanks zu und vergewissern Sie sich das die Silikondichtung richtig eingesetzt ist.

**Hinweis:** Bevor Sie den oberen Bereich des Tanks zuschrauben, entfernen Sie bitte mögliche Rückstände von Mikrokristallen am Gewinde und an der Silikondichtung um den Verlust von Dichtigkeit zu vermeiden.

4 Ersatzfilter sind im Lieferumfang enthalten.

- Der Filter im Behälter 1 vermeidet, dass die Mikrokristallen in dem Saugkreis vom Gerät reinkommen. Im Lieferumfang bekommen Sie 4 Filter. Um den Filter auszutauschen schrauben Sie den Deckel von dem Behälter, legen Sie das alte Filter weg, legen Sie den neuen Filter und schrauben Sie den Behälter zu.
- Desinfektionsmethode:
  - Verwenden Sie nach der Behandlung bitte destilliertes Wasser und eine Bürste um die Zubehörteile zu reinigen, tauchen Sie sie im Anschluss vollständig in den Kontainer ein um sie in der 75%igen Alkohollösung 15 Minuten lang zu desinfizieren. Im Anschluss, entnehmen Sie sie bitte, reinigen sie und legen sie in den UV Sterilisator für den nächsten Gebrauch.

### **Diamant microdermabrasionsgerät**

- Das Schaumstofffilter im Handgriff muss jeweils nach 5 Behandlungen ausgetauscht werden. Bauen Sie den Handgriff auseinander und ersetzen Sie das Filter. Danach bauen Sie den Handgriff wieder zusammen.
- Reinigen und sterilisieren Sie die Diamantaufsätzen nach jedem Gebrauch.